

COMeN Поделись с миром



F1/F1A/F2/F2A

Полу/ полностью автоматический
внешний дефибриллятор

Быстро и эффективно



«Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»
(Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.)

Адрес: здание 2, FIYTA Таймпис Билдинг, проспект Наньхуан, район Матиан, район Гуанмин,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, 518106, КНР (No.2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China) Тел: +86-755-2643 1236
400-700-9488 Факс: +86-755 2643 1232 Сайт: en.comen.com Email: info@szcomen.com

P/N: RU-F1/F1A/F2/F2A-8P-20260506-V1.1

Быстрая работа

AED серии F - это компактное и легкое устройство с удобной конструкцией, которая позволяет действовать без промедления. Большой 7-дюймовый экран HD* обеспечивает яркое интерактивное руководство, что делает процесс спасения легким. Чёткие голосовые подсказки делают процесс спасения простым и понятным.



Интуитивный алгоритм оказания помощи

Comen AED помогает спасать жизнь- быстро и без промедления.



01 Открыть крышку для включения

При открытии корпуса AED тут же активируется: громкость включена, голосовые инструкции ведут пользователя по всем этапам применения.



02 Прикрепить электроды

Видеоподсказки и голосовые инструкции показывают и объясняют, как точно установить электроды на теле пациента.



03 Нажмите кнопку разряда (полуавтоматическая версия)

Если нужен разряд, дефибриллятор подаст звуковой и световой сигнал, указывая на кнопку разряда. Двойной контроль-гарантия правильного действия.

Инструкция по проведению СЛР

Comen AED соответствует руководству АНА или ERC по процедурам спасения. Во время CPR активируется метроном, чтобы спасатели следовали за ним. Соотношение сжатия изменяется автоматически при изменении типа пациента.



* Экран доступен только на F2/F2A.

Быстрое и эффективное лечение



Ускорение темпов спасения

При фибрилляции желудочков (VF) каждая секунда на счету. Быстрое применение AED повышает шансы на выживание. Comen AED совмещает предварительную зарядку с анализом ритма, исключая дополнительное время на зарядку. От включения до первого разряда мощностью 200 Дж проходит менее 7 секунд. При втором или третьем разряде устройство автоматически корректирует уровень энергии согласно заданным параметрам, повышая эффективность реанимации.



Традиционный AED



Comen AED




Повышение эффективности спасения

360 Дж

Comen AED обеспечивает максимальную энергию разряда 360 Дж для лечения пациентов даже с основными состояниями здоровья, такими как инфаркт миокарда и ожирение. Энергия разряда ослабляется при переходе из режима взрослого в режим ребенка, улучшая безопасность и эффективность лечения.

БТЭ

В устройстве используется двухфазная усечённая экспоненциальная форма импульса (BTE) с функцией автоматической компенсации импеданса пациента, что обеспечивает максимальную эффективность дефибрилляции.

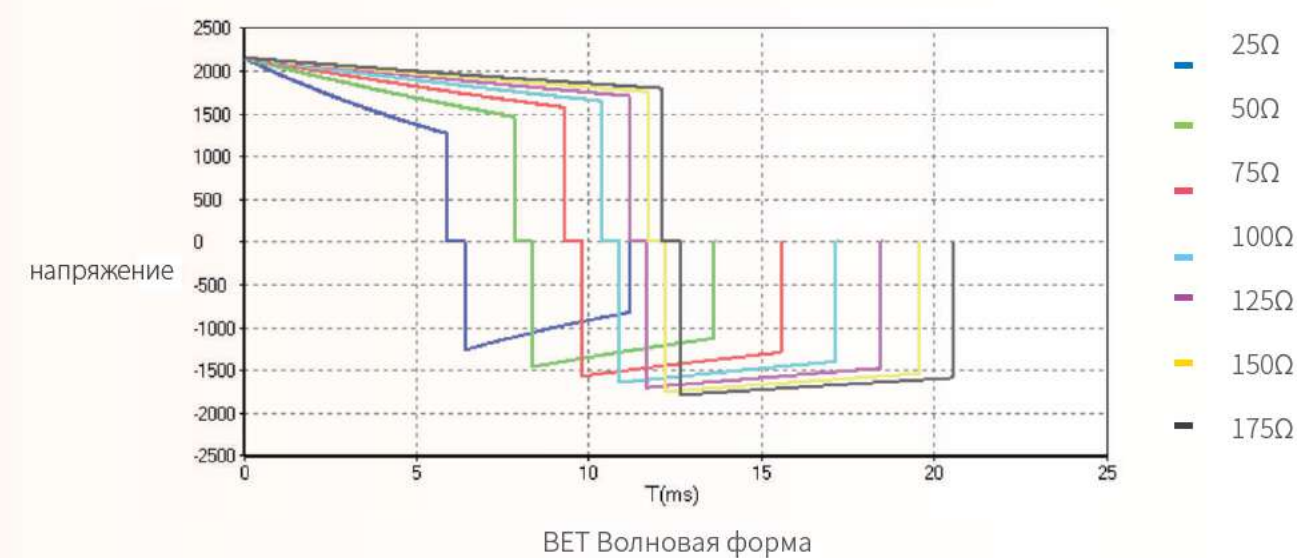

Нижнее напряжение



Меньше травм



Лучшее лечение

Прочный дизайн


Comen AED прошёл комплекс строгих испытаний и работает даже в сложных условиях. Прочные аксессуары рассчитаны на длительное хранение, а функция автоматического тестирования гарантирует надёжность устройства с течением времени.



*Пожалуйста, свяжитесь с командой Comen для получения дополнительной информации

Интеллектуальное управление*

На основе технологии IoT система интеллектуального управления Comen обеспечивает контроль над парком AED на протяжении всего жизненного цикла. Устройство автоматически передаёт свой статус через Wi-Fi / 4G / 5G. Уведомления о неисправностях направляются в систему для удалённого планового контроля или оперативного устранения проблем — без выезда на место, что снижает затраты на персонал и обслуживание.

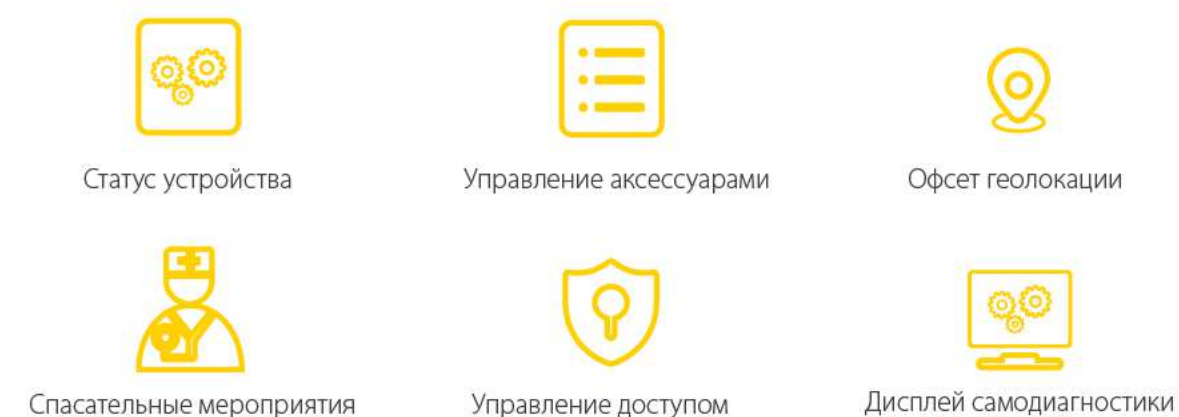

*Доступность может варьироваться в разных местах, пожалуйста, проконсультируйтесь с местной командой Comen для получения дополнительной информации.

