

Sanctuary[®]

Латексные и Безлатексные коффердамы



ООО «ДЕНТ-МЕД»
Эксклюзивный дистрибьютор Sanctuary в РФ

КОФФЕРДАМ SANCTUARY НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ЛАТЕКС с ароматом мяты! ФИОЛЕТОВЫЙ PURPLE



Sanctuary производит коффердамы без содержания латекса, из полиизопрена – материала, очень близкого к резине. По своим свойствам и структуре полимеров он близок к натуральной резине, к тому же является гипоаллергенным материалом.

Разработанный, как продукт высшего качества, неопудренный коффердам Sanctuary без содержания латекса обладает высоким сопротивлением к растяжению (минимальное растяжение - в 10 раз по сравнению с начальным размером пробивки), высокой прочностью (свыше 20 мПа) и хорошим индексом эластичности (1,0 мПа). Эти совокупные характеристики позволяют использовать коффердамы с максимальным удобством для потребителя.



Международный стоматологический журнал Dental Advisor с независимыми экспертами, присвоил Sanctuary без латекса награду «самый предпочитаемый продукт» 2017 года.

Преимущества:

1. Гипоаллергенен
2. Эластичен и прочен
3. Приятный цвет
4. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:


Цвет: фиолетовый

Размеры : 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 15 шт

Плотность: 0,25 мм (средний)

Аромат: мята 

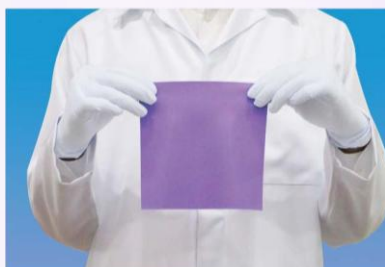

ЛАТЕКСНЫЙ КОФФЕРДАМ СИНИЙ BLUE / ЗЕЛЕНый GREEN

Коффердам Sanctuary латексный – это неопудренные листы, изготовленные из латекса. Листы коффердама предназначены для использования во время стоматологических процедур для изоляции необходимого зуба, чтобы обеспечить лечение зубов более комфортным, надежным и безопасным как для пациента, так и для врача.

Неопудренные коффердамы Sanctuary производятся по специальной технологии Sanctech, которая позволяет производить листы эластичными (1МПа), а значит более прочными с высокой резистентностью к разрывам (больше 10Мпа). Кроме того коффердам Sanctuary содержит минимум протеинов и пудры что делает конечный продукт безопаснее и доступнее в использовании.



Коффердам СИНИЙ

Преимущества:

1. Нейтральный по цвету и запаху
2. Эластичен и прочен
3. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:

Цвет: синий

Размеры: 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 36 шт

Плотность:

- ✓ 0,14 мм – тонкий
- ✓ 0,18 мм – средний
- ✓ 0,22 мм – плотный

Аромат: без запаха



Коффердам ЗЕЛЁНЫЙ

Преимущества:

1. Нежный, ненавязчивый аромат мяты
2. Эластичен и прочен
3. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:

Цвет: зеленый

Размеры : 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 36 шт

Плотность:

- ✓ 0,14 мм – тонкий
- ✓ 0,18 мм – средний
- ✓ 0,22 мм – плотный

Аромат: мята 



ЧЁРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ КОФФЕРДАМ



Sanctuary Latex Black Dental Dam обеспечивает лучший контраст и является отличной альтернативой для дентальной фотографии по сравнению с обычными цветными коффердами.

«ТОП ПРОДУКТ 2022» по мнению независимых экспертов международного стоматологического журнала Dental Advisor

Преимущества:

1. Идеальная контрастность
2. Поглощает свет, что препятствует возникновению отсвечиваний на фотографии.
3. Более плотный, чем базовые цвета листов.
4. Идеален для клиник, работающих в стиле «Black Style»
5. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:

Цвет: чёрный


Размеры: 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 36 шт

Плотность:

- ✓ 0,16 мм – тонкий
- ✓ 0,20 мм – средний
- ✓ 0,24 мм – плотный

Аромат: мята

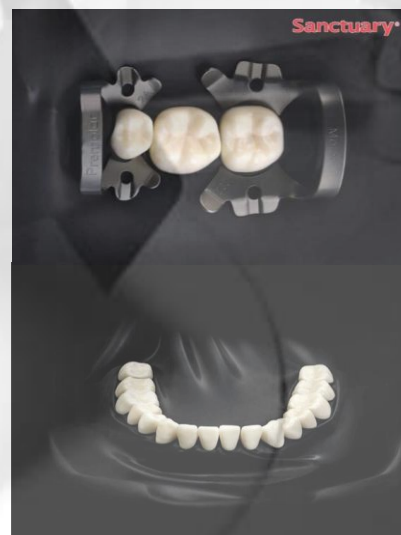

ЛАТЕКСНЫЙ КОФФЕРДАМ РОЗОВЫЙ PINK

Латексный коффердам Sanctuary – это неопудренные листы, изготовленные из латекса. Листы коффердама предназначены для использования во время стоматологических процедур для изоляции необходимого зуба, чтобы обеспечить лечение зубов более комфортным, надежным и безопасным как для пациента, так и для врача.



Преимущества:

1. Комфорт для глаз доктора при длительной работе
2. Эстетика в работе
3. Приятный и успокаивающий цвет, который обеспечит комфорт и расслабляющую атмосферу во время лечения.
3. Повышенная устойчивость к разрывам
4. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:

Цвет: розовый

Размеры : 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 36 шт

Плотность:

✓ 0,20 мм – средний

Аромат: мята



ЛАТЕКСНЫЙ КОФФЕРДАМ ГОЛУБОЙ ШЁЛК SILK BLUE

Латексный коффердам Sanctuary – это неопудренные листы, изготовленные из латекса. Листы коффердама предназначены для использования во время стоматологических процедур для изоляции необходимого зуба, чтобы обеспечить лечение зубов более комфортным, надежным и безопасным как для пациента, так и для врача.



Преимущества:

1. Максимальная ретракция десны за счет повышенной плотности.
2. Идеально сухое рабочее поле при препарировании пришеечной области
3. Устойчив к разрывам при работе бором на 5-м классе в пришеечной области.
4. Отлично подходит для инверсии платка в десневое пространство.
5. Снижает усталость глаз при длительной концентрации.
6. Фотогеничный и эстетичный для дентальной фотографии
7. Шаблон в каждой упаковке

Характеристики:

Цвет: голубой

Размеры: 152*152 (6*6)

Кол-во листов в упаковке: 36 шт

Плотность:

- ✓ 0,22 мм – тонкий
- ✓ 0,28 мм – средний

Аромат: мята 



КОФФЕРДАМ ЛАТЕКСНЫЙ ДЕТСКИЙ

Благодаря латексным листам меньшего размера, идеально подойдут в работе с самыми маленькими пациентами. Представлены только в двух плотностях: тонкие и средние для нежных дёсен



Коффердам СИНИЙ

Преимущества:

1. Нейтральный по цвету и запаху
2. Подходит для работы с маленькими рамками
4. Шаблон в каждой упаковке
5. Больше кол-во листов в одной упаковке

Характеристики:

Цвет: синий

Размеры: 127*127 (5*5)

Кол-во листов в упаковке: 52 шт

Плотность:

- ✓ 0,14 мм – тонкий
- ✓ 0,18 мм – средний

Аромат: без запаха

Коффердам ЗЕЛЁНЫЙ

Преимущества:

1. Нежная, не приторная мята
2. Подходит для работы с маленькими рамками
4. Шаблон в каждой упаковке
5. Больше кол-во листов в одной упаковке

Характеристики:

Цвет: зелёный

Размеры: 127*127 (5*5)

Кол-во листов в упаковке: 52 шт

Плотность:

- ✓ 0,14 мм – тонкий
- ✓ 0,18 мм – средний

Аромат: мята 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПЛОТНОСТИ



Sanctuary специально разработали несколько вариантов плотностей, которые подойдут для различных стоматологических процедур любой сложности.

Тонкий, средний

Изоляция одного
зуба

Средний и плотный

Для любых процедур.
Изоляция нескольких
зубов

**Плотный и
Экстра плотный**

Пришеечный кариес
Максимальная
ретракция десны

Средний

Для моляров и
Премоляров

Плотный

Улучшенная
ретракция десны



Дент-Мед

Эксклюзивный дистрибьютор продукции

Sanctuary®

в России

Отдел продаж

+7938 162 55 54  +7961 311 2185

г.Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский 61, оф.13



zakaz.dentmed2016@gmail.com

dentmed2016@gmail.com



ООО «ДЕНТ-МЕД»
Эксклюзивный дистрибьютор Sanctuary в РФ